

ACETABULAR CUPS & FEMORAL STEMS EXPLANTATION KIT

LARGE DIAMETERS KIT



GRUPPO
BIOIMPIANTI

Enjoy Mobility

IT | EN | ES

110381670

ACETABULAR CUPS EXPLANTATION KIT



KIT RIMOZIONE COTILI

IL KIT RIMOZIONE COTILI permette di semplificare, rendere più sicuro e meglio pianificabile l'intervento di ri protesizzazione d'anca, rendendo possibile controllare la dissezione ossea a livello dell'acetabolo - cotile, durante l'intervento di revisione.

EXPLANTATION CUP KIT

The ACETABULAR CUP EXPLANTATION KIT allows to simplify, make safer, more comfortable and easier to plan the revision hip surgery, making it possible to check the bone dissection at the acetabulum - cotyle level.

KIT DE EXTRACCIÓN COTILOS

EL KIT DE EXTRACCIÓN DE COTILOS ACETABULARES permite simplificar y hacer más segura y mejor planificada la intervención de revisión de cadera.

El kit permite controlar la disección ósea en el nivel acetábulo-cotilo.



CARATTERISTICHE DEL SISTEMA

Due diversi tipi di lama:

- **LAMA CORTA** (diam 44÷66mm), per sezionare l'osso più duro, vicino al bordo del cotile;
- **LAMA LUNGA** (diam 44÷66mm), utilizzata, in seguito, per completare la dissezione e preparare l'acetabolo per il nuovo impianto;
- **TESTE DI CENTRAGGIO** (28, 32, 36mm), per consentire una corrispondenza accurata ai diversi diametri interni dei cotili disponibili sul mercato.

FEATURES OF THE SYSTEM

Two different types of blade:

- **SHORT BLADE** (diam 44÷66mm), to dissect the hardest bone, the nearest to the edge of the cup;
- **LONG BLADE** (diam 44÷66mm), used, later, to complete the dissection and prepare the acetabulum for the new implant;
- **TRIAL HEADS** (28, 32, 36mm), to allow an accurate correspondence to the different internal diameters of the cups available on the market.

CARACTERISTICAS DEL SISTEMA


Dos diferentes estilos de hoja:

- **HOJA CORTA** (diam 44÷66mm), para la disección del hueso denso y más duro, el más cercano al borde del cotilo;
- **HOJA LARGA** (diam 44÷66mm), para completar la disección y preparar el acetábulo a el nuevo implante;
- **CABEZAS DE PRUEBA** (28, 32, 36mm), permite una correspondencia precisa con los diferentes diámetros internos de los cotilos disponibles en el mercado.

AMPLIA SELECCIÓN DE DIÁMETROS DE
HOJA PARA ADAPTARSE
PERFECTAMENTE AL DIÁMETRO
EXTERIOR DEL COTILO Y
CONSERVAR UNA MAYOR
CANTIDAD DE TESSUTO
OSSEO


AMPIA
SCELTA DI
DIAMETRI DELLA LAMA
PER ADATTARSI
PERFETTAMENTE AL
DIAMETRO ESTERNO DEL
COTILE E PRESERVARE UNA
MAGGIORE QUANTITÀ DI
TESSUTO OSSEO POSSIBILE

THE WIDE CHOICE OF BLADE
DIAMETERS ALLOWS THE PERFECT
ADAPTATION TO THE EXTERNAL
DIAMETER OF THE CUP, IN ORDER
TO PRESERVE A GREATER QUANTITY
OF BONE TISSUE

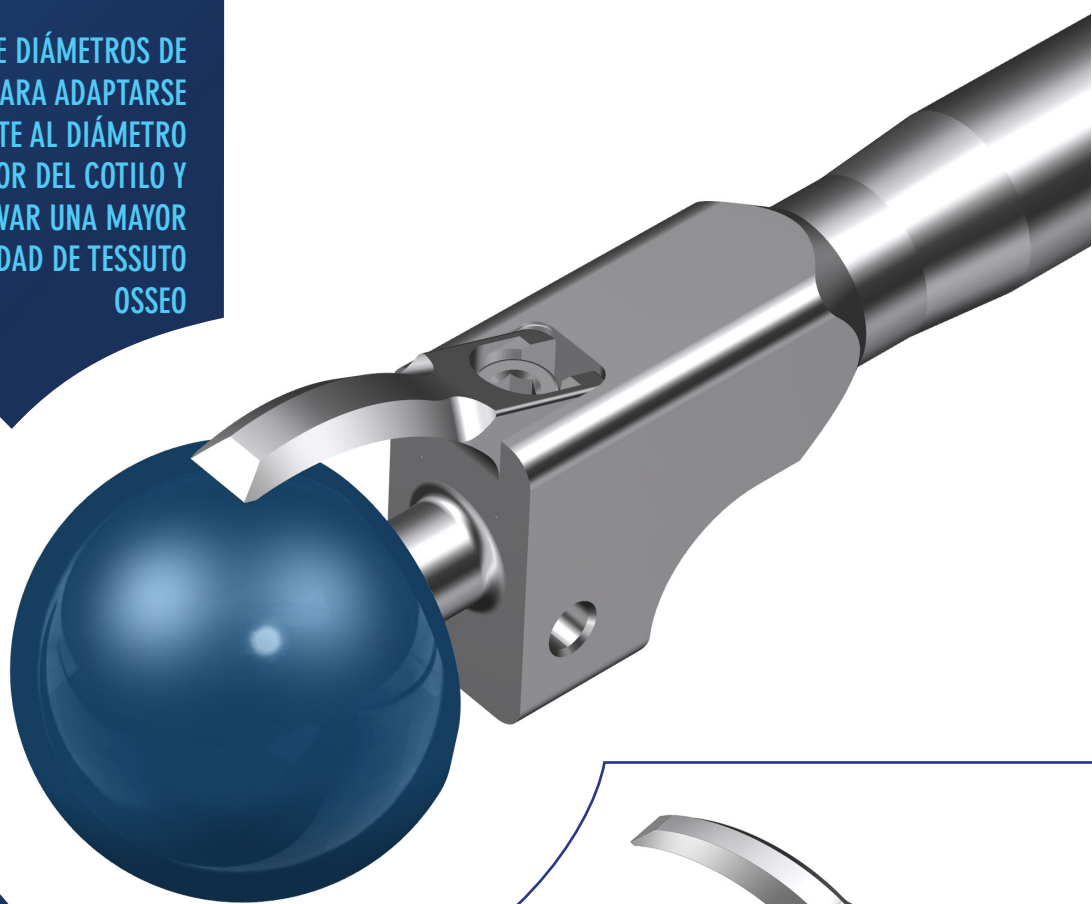

IT	EN	ES	REF	SIZE	IT	EN	ES	REF	SIZE
1 Lama Corta	Short Blade	Hoja Corta	H0050450099	44 mm	3 Lama Lunga	Long Blade	Hoja Larga	H0050450109	44 mm
			H0050450119	46 mm				H0050450129	46 mm
			H0050450139	48 mm				H0050450149	48 mm
			H0050450159	50 mm				H0050450169	50 mm
			H0050450179	52 mm				H0050450189	52 mm
			H0050450199	54 mm				H0050450209	54 mm
			H0050450219	56 mm				H0050450229	56 mm
			H0050450239	58 mm				H0050450249	58 mm
			H0050450259	60 mm				H0050450269	60 mm
			H0050450279	62 mm				H0050450289	62 mm
2 Teste di centraggio	Trial Head	Cabezas de prueba	H0050051500	28mm	4 Osteotomo	Osteotome	Osteotomo	H0050050199	-
			H0050051501	32mm	5 Cacciavite esagonale	Hexagon screwdriver	Destornillador exagonal	H0030158599	-
			H0050051502	36mm	6 Vassoio con coperchio	Tray and cover	Bandeja y tapa	H0058600000	-



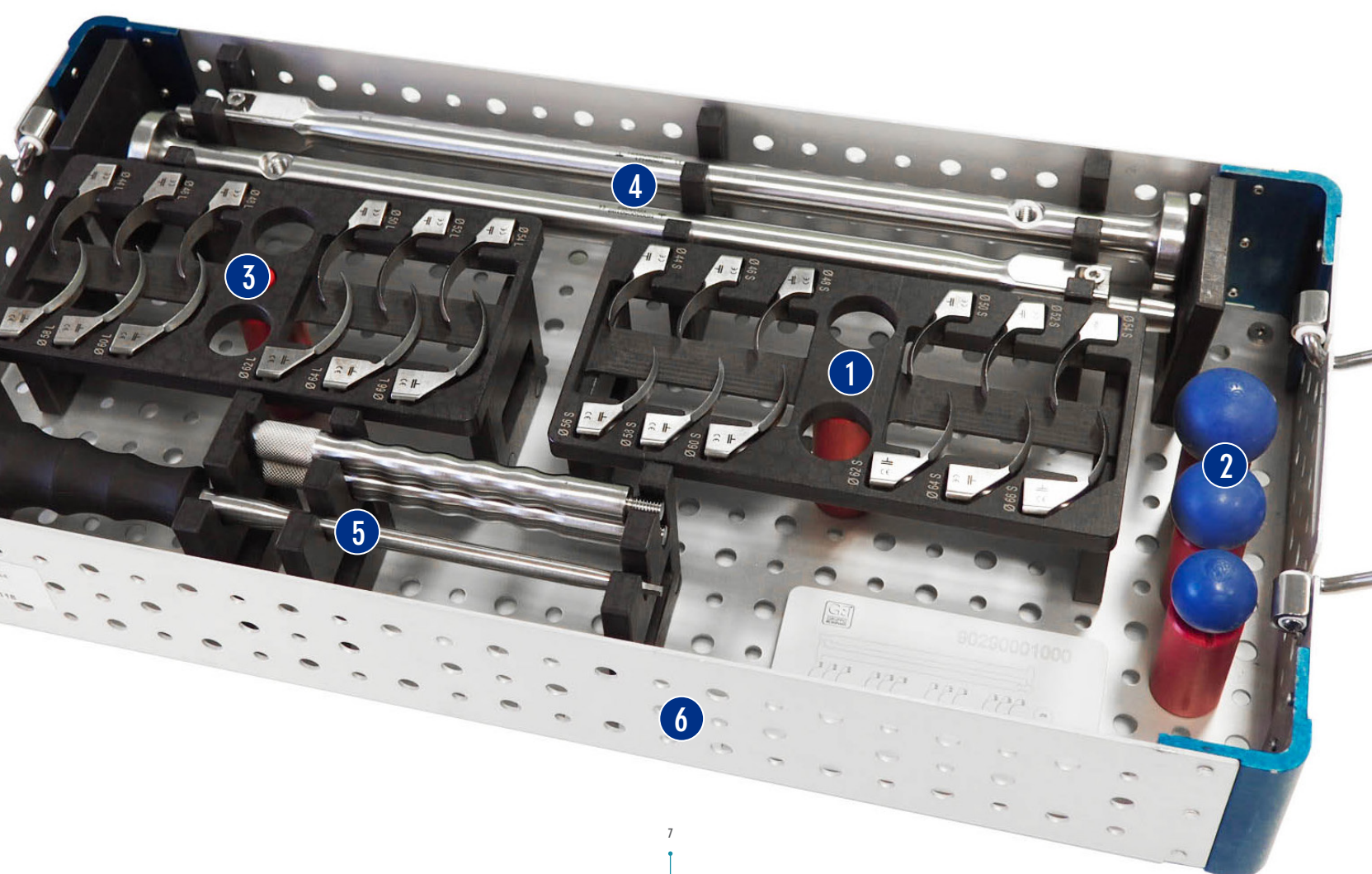

FEMORAL STEMS EXPLANTATION KIT



KIT RIMOZIONE STELI FEMORALI

IL KIT RIMOZIONE STELI FEMORALI, in caso di intervento di riptotesizzazione d'anca, permette di allentare lo stelo dal cemento o di intervenire sull'ancoraggio biologico, grazie alla combinazione di lame sottili, radiali e a scalpello. Ogni design delle lame, come la curvatura, la geometria di taglio o la lunghezza del corpo, è ideata per offrire un'alta flessibilità d'utilizzo, mantenendo sempre un'ottima resistenza meccanica.

FEMORAL STEM EXPLANTATION KIT

The FEMORAL STEM EXPLANTATION KIT, in the case of a revision hip surgery, gives the possibility to loosen the stem from the cement or to disrupt biological fixation, using a combination of thin, radial and chisel blades. Each blade geometry feature, like curvature, cutter shape or length of the body, are optimized to offer high flexibility of use maintaining always great mechanical strength.

KIT DE EXTRACCIÓN VÁSTAGOS


EL KIT DE EXTRACCIÓN VÁSTAGOS, en caso de intervención de revisión de cadera, ofrece la posibilidad de aflojar el vástago del cemento o de intervenir en el anclaje biológico, gracias a una combinación de hojas finas, radiales y de cincel.

Cada característica del diseño de las hojas, como la curvatura, la geometría de corte o la longitud del cuerpo, están diseñadas para ofrecer una alta flexibilidad de uso, manteniendo siempre una excelente resistencia mecánica.

	IT	EN	ES	REF	SIZE
1	Lame radiali curvatura mediale	Medial curve Radial blades	Hojas radiales curvatura medial	H0050155009	127x12
				H0050154009	172x12
2	Lama a scalpello extra lunga	Chisel extra long blade	Hoja de cincel extra larga	H0050209509	228x8
3	Lame sottili	Thin blades	Hojas fines	H0050150009	76x8
				H0050150509	76x10
				H0050151009	76x12
				H0050151509	76x20
3	Lama a scalpello	Chisel blades	Hoja de cincel	H0050205509	76x8
				H0050206009	76x10
				H0050206509	76x12
				H0050207009	76x20
3	Lame sottili curve	Curverd thin blades	Hojas fines curvas	H0050152009	76x12
				H0050152509	76x20
4	Lame radiali curvatura laterale	Lateral curve Radial blades	Hojas radiales curvatura lateral	H0050155509	127x12
				H0050154509	172x12

	IT	EN	ES	REF	SIZE
5	Lame radiali	Radial Blades	Hojas radiales	H0050153009	127x10
				H0050202509	127x12
				H0050153509	127x14
				H0050203009	127x16
5	Lama a scalpello	Chisel blades	Hoja de cincel	H0050203509	127x20
				H0050207509	127x8
				H0050208009	127x10
				H0050208509	127x12
5	Lame sottili	Thin blades	Hojas fines	H0050209009	127x20
				H0050204009	127x8
5	Lame sottili	Thin blades	Hojas fines	H0050204509	127x10
6	Manico per estrazione lame	Blade Extractor Handle	Mango para Extractor hojas	H0050100599	-
7	Manico supporto lama	Blade support Handle	Mango para hoja	H0050300099	-
8	Vassoio con coperchio	Tray and cover	Bandeja y tapa	H0058700000	-



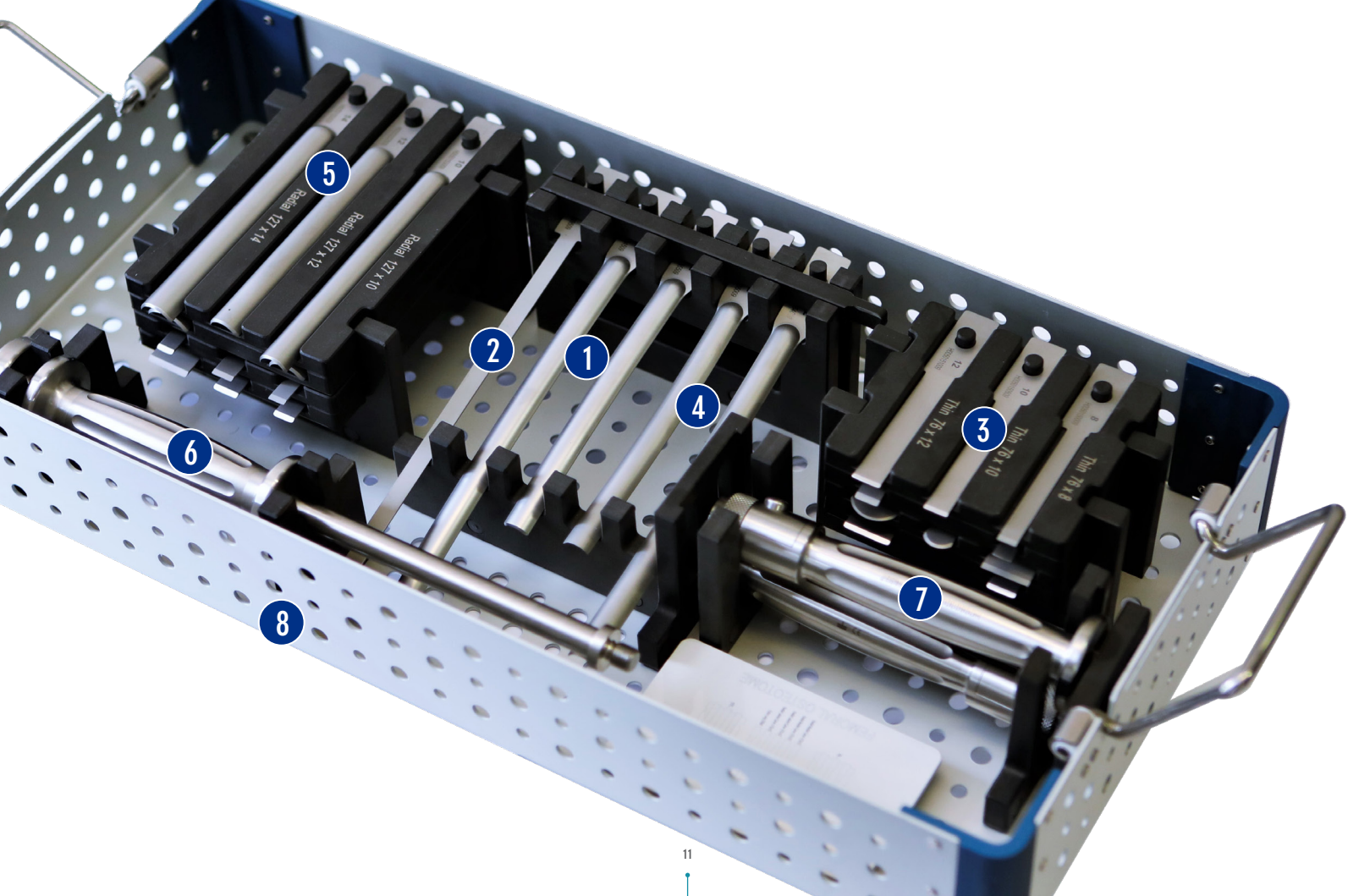

5

2

1

4

3

6

7


8

LARGE DIAMETERS KIT



KIT GRANDI DIAMETRI

IL KIT GRANDI DIAMETRI è composto da frese acetabolari e cotili di prova dalla misura 64mm alla 72mm, ideali in caso di revisione acetabolare.

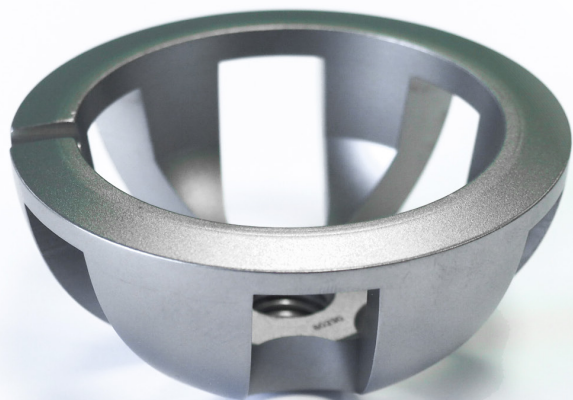


LARGE DIAMETERS KIT


The LARGE DIAMETERS KIT is composed of acetabular reamers and trial cups from size 64mm to 72mm, ideal for acetabular revision.

KIT LARGE DIAMETERS

EL KIT LARGE DIAMETERS se compone de fresas acetabulares y copas de prueba de tamaño desde 64mm a 72mm, ideal en caso de revisión acetabular.

	IT	EN	ES	REF	SIZE
1	Frese acetabolari	Acetabular reamers	Fresas acetabulares	110384064	64 mm
				110384066	66 mm
				110384068	68 mm
				110384070	70 mm
				110384072	72 mm
2	Cotili di prova	Trial cups	Copas de prueba	110381664N	64 mm
				110381666N	66 mm
				110381668N	68 mm
				110381670N	70 mm
				110381672N	72 mm
3	Vassoio con coperchio	Tray and cover	Bandeja y tapa	110381710	-

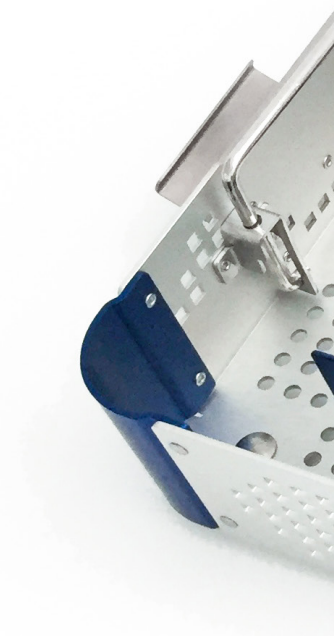

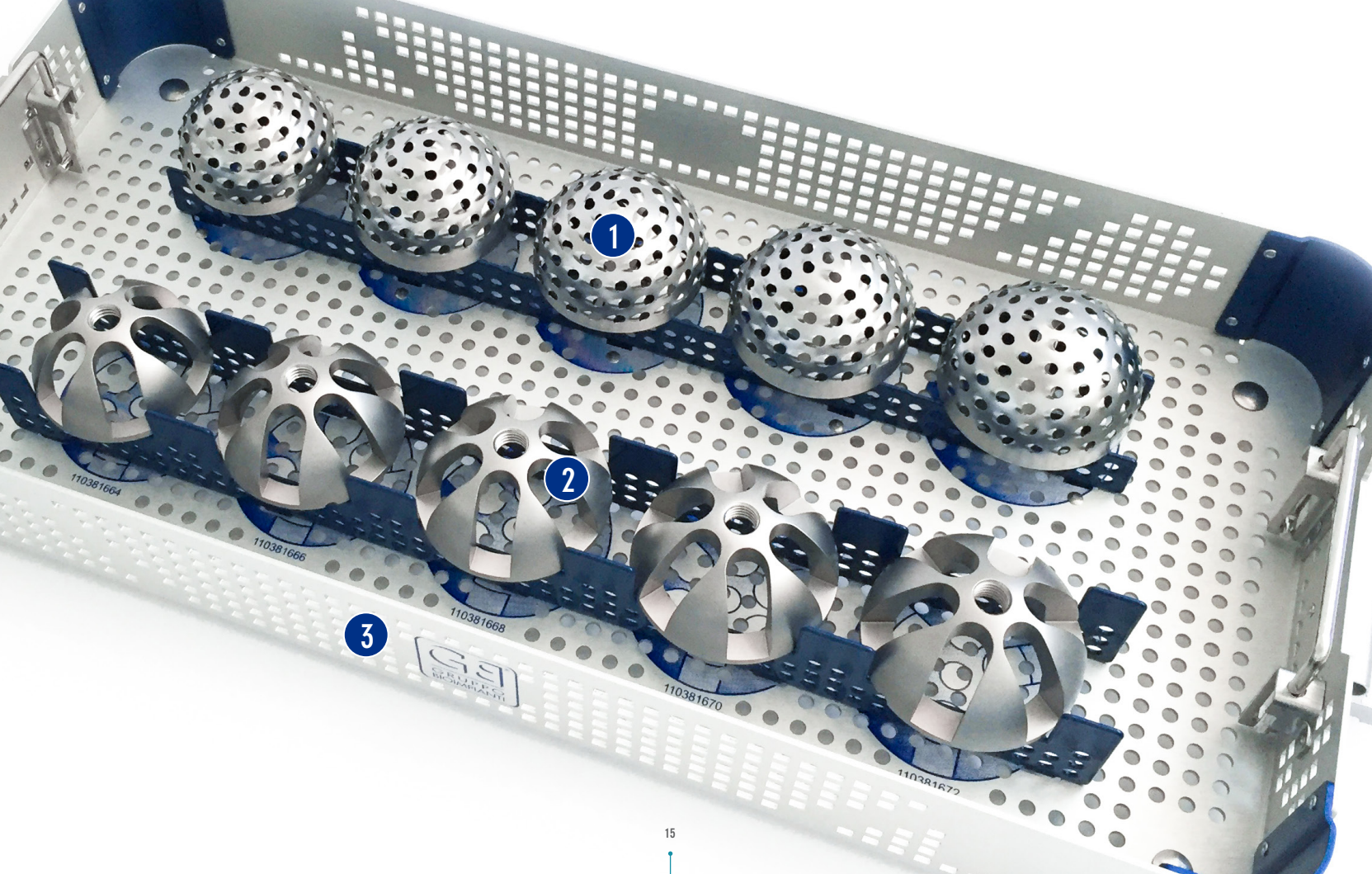



Enjoy Mobility

GRUPPO BIOIMPIANTI S.R.L.

Via Liguria 28, 20068 Peschiera Borromeo (Milan) Italy

Tel. +39 02 51650371 - Fax +39 02 51650393

info@bioimpianti.it

bioimpianti.it



KITRIMCOT-IP-000 REV 01 2020